


# MULTIPOLAR™

NEW PACKAGE

## カップとライナーを別梱包にしました

- 新しいパッケージデザインにより、包装内の商品の輸送中における動揺を防止する工夫が施されました。
- カップとライナーを別梱包にすることで、骨頭径の変更の準備が容易になりました。
- ポリエチレンライナーは、開封まで酸化を最小限に抑えるNITROGEN PACKで梱包されています。

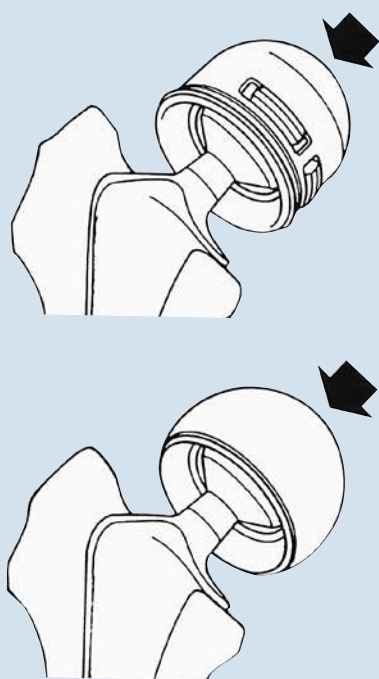


## 信頼度の高いロッキング機構と、簡単な操作性

- ライナーに内蔵されたポリエチレン製リングは金属製カップによって確実にロックされ、骨頭ネックの脱臼を防止します。万一開口部のUHMWPEの摩耗が生じた場合でも、ロッキング機構は脱落しません。
- 特別な器械を使用せずに瞬時にライナーとカップを組み合わせる事ができます。リビジョン等により抜去する際は、抜去鉗子により容易にカップを外す事ができます。

## 幅広い選択肢

- ZIMMER TOTAL HIP SYSTEMの中より、好みのシステムと組み合わせが可能です。
- φ22mm、φ26mm、φ28mm骨頭ネック用の3種類のライナーが選択できます。
- 38mm (φ22mm I.D) ~ 1mm間隔のサイズバリエーションは、より多くの患者に適応可能です。

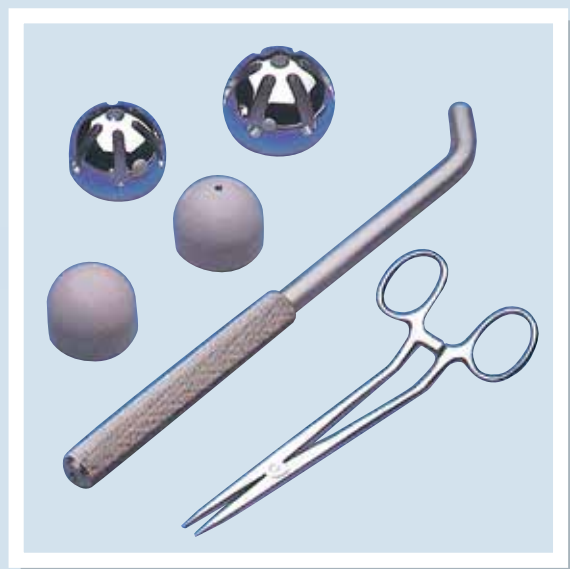

# Ordering Information

## Multipolar List

●  $\gamma$ 線滅菌済 ● 材質 アウターシェル Zimaloy Alloy  
インナーライナー UHMWPE

サイズ (mm)	マルチポーラカップ	マルチポーラライナー 22mm	マルチポーラライナー 26mm	マルチポーラライナー 28mm
38	00-5001-038-00	00-5001-038-22	—	—
39	00-5001-039-00	00-5001-039-22	—	—
40	00-5001-040-00	00-5001-040-22	00-5001-040-26	—
41	00-5001-041-00			
42	00-5001-042-00	00-5001-042-22	00-5001-042-26	—
43	00-5001-043-00			
44	00-5001-044-00			
45	00-5001-045-00	00-5001-044-22	00-5001-044-26	00-5001-044-28
46	00-5001-046-00			
47	00-5001-047-00			
48	00-5001-048-00	00-5001-047-22	00-5001-047-26	00-5001-047-28
49	00-5001-049-00			
50	00-5001-050-00			
51	00-5001-051-00	00-5001-050-22	00-5001-050-26	00-5001-050-28
52	00-5001-052-00			
53	00-5001-053-00			
54	00-5001-054-00	00-5001-053-22	00-5001-053-26	00-5001-053-28
55	00-5001-055-00			

● 医療機器承認番号 20300BZY00633000：マルチポーラ

※オーダーの際は、必ずカップとライナーをセットにてご注文ください。  
※外径56mm以上のサイズについては、地域担当営業までお問い合わせください。



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ ..... Tel. 03-6402-6601

営業拠点：札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、名古屋、大阪、岡山、福岡