

プレジジョンIIシリーズ
ハンドインスツルメント



BIOMET

プレジジョンⅡシリーズ

イントロダクション：鏡視下手術及び一般手術において触覚に優れ最も進化したインスツルメントに、と言う外科医のインプットをもとに開発されたハンドインスツルメントのコンプリートラインです。インスツルメントのハンドルは、人間工学的にデザインされ、外科医の手にフィットし長時間に及ぶ手術でも外科医の疲労を軽減します。

- ハイポリッシュ仕上げ



- パンチ、グラスパーのコンプリートライン

- ロープロファイルな刃先形状は、タイトな
ジョイントスペースに容易にアクセス



- ソリッドなステンレススチール
は、インスツルメントと手が一体
となって操作可能

ユニークな伝動機構

ハンドルと作動装置を連結するピボットピンは、組織の切除・把持時に大きな負荷下に置かれるアゴ部へ強度と安定性を与えます。プレシジョンⅡのピンレス連結機構は、作動装置の後端から直接アゴに、ピンを用いることなく、しっかりと力を伝えます。

この機構によりグラスパーは、軟部組織を把持したり切除する際に、両アゴ間に高い力を与えることができます。

ピボットメカニズム

メニスカルパンチの上アゴと下アゴのクリアランスは非常に狭く高精度に加工されており、半月板や他の組織をシャープに切除できます。

精密加工技術

熟練工による最終研磨仕上げで精密な刃先を実現しました。

A variety of designs are available to meet your surgical demands.

1.7mm パンチ(バイター)



910030
メニスカリフトパンチ
上15度 刃巾1.7mm



910031
カーブドパンチ 15度 左
上15度 刃巾1.7mm



910032
カーブドパンチ 15度 右
上15度 刃巾1.7mm



910033
プラントノーズパンチ
上15度 刃巾1.7mm

2.6mm パンチ(バイター)




910040
スタンダードパンチ
直 刃巾2.6mm



910041
スタンダードパンチ
上15度 刃巾2.6mm



910042
スタンダードパンチ
直 刃巾3.6mm

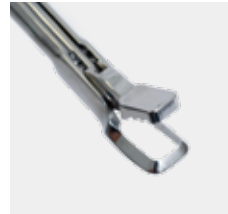

910043
スタンダードパンチ
上15度 刃巾3.6mm



910044
カーブドパンチ 15度 左
上15度 刃巾3.6mm

3.6mm パンチ(バイター)


3.6mm パンチ(バイター)



910045
カーブドパンチ 15度 右
上15度 刃巾3.6mm




910046
カーブドパンチ 15度 左
上15度 刃巾3.6mm

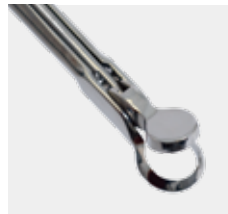

910047
ラウンドパンチ
直 刃巾5.0mm

5.0mm ラウンドパンチ(バイター)

3.2mm ロータリーパンチ(サイドバイター)

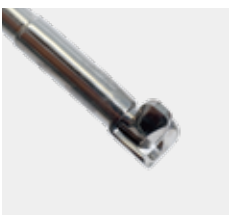

910052
ロータリーループパンチ
左90度 刃巾3.2mm



910053
ロータリーループパンチ
右90度 刃巾3.2mm



910050
レトロパンチ 左
直 刃巾2.4mm



910051
レトロパンチ 右
直 刃巾2.4mm

2.4mm バックパンチ(バックバイター)

ティッシュグラスパー




910060
アリゲーターグラスパー
直 刃巾 3.8mm



910061
グラスパー
直 刃巾 3.4mm

ティッシュロンジュール

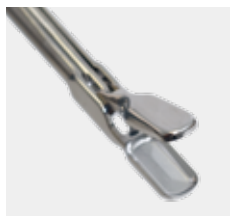


910062
ロンジュール
直 刃巾 4.0mm

プローブ



901010 ※
キャリブレテッドプローブ

スーチャーカッター

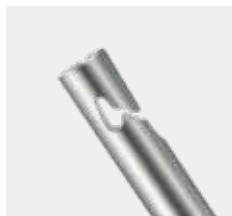

904808
MAXCutter スーチャー
カッタースロットド

ノットプッシャー



902813
ノットプッシャークローズド
タイプ

シザーズ



910070
シザーズ
左 20度



910071
シザーズ
右 20度


スーチャーグラスパー



910078
スーチャーグラスパー/
レトリバー




910083
バンバイアスーチャーグラ
スパー

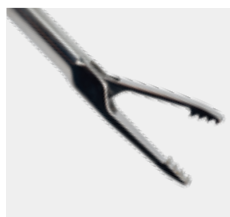


910063
マルチグラスパー
(ティッシュグラスパー/
スーチャーグラスパー)


アースロパッサー スーチャーパッサー

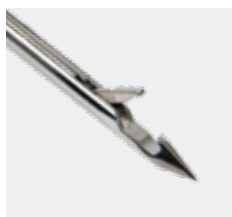


910079
アースロパッサー
直

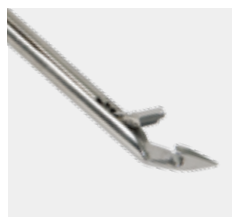

910080
アースロパッサー
左 45度

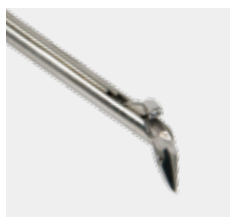

910081
アースロパッサー
右 45度

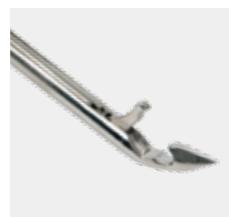

910082
アースロパッサー
上 35度

A variety of designs are available to meet your surgical demands.

エレベーター/ラスプ



904800
スムーズエレベーター
15度



904801
スムーズエレベーター
30度



904803
SLAP ラスプ
15度



904804
Bankart ラスプ
15度



903719
シャーロット
ラスプ/エレベーター 15度



901131bsm ※※
ラスプ
UP 20度



901141bsm ※※
ラスプ
DOWN 20度



902100bsm ※※
ティッシュエレベレーター
UP



902141bsm ※※
ティッシュエレベレーター
DOWN

販売名：SPORTS 汎用手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0004
※販売名：関節鏡手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0003
※※販売名：靱帯再建用手術器械
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228ST0005



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡