

マイクロチョイス・シリーズ

電動式骨手術器械

A NEW DIMENSION OF
POWER AND CONTROL.

 zimmer

THE MICROCHOICE™

ホール マイクロチョイス システムは、
形成外科・口腔外科・脳神経外科・そして整形外科等幅広い分野において、
さまざまなニーズに充分お応えできる高性能電動式手術器械です。

その1

ホール マイクロチョイス システムは、高い操作性・機能性に加え豊富なアクセサリーにより満足感を提供します。


その2

ホール マイクロチョイス システムは、すべてのアイテムをオートクレーブによる滅菌が可能です。(コントローラーは滅菌不要です。)ハンドピースは注油を必要としないので手術後のメンテナンスも非常に容易です。

※滅菌方法：オートクレーブまたはEOG

その3

ホール マイクロチョイス システムには、従来型マイクロE・サージトームEハンドピースをご使用いただけます。(ハンドピースコードには、マイクロE・サージトームE用アタッチメント(5020-048)をご使用ください。)

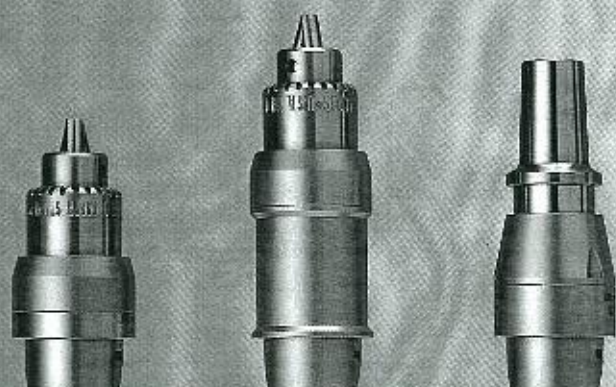

5020-028 ▶
ワイヤードライバー
アタッチメント

▲ 5020-030

ジャコブスチャック
アタッチメント

▲ 5020-031

ジャコブスチャック
アタッチメント
ハイトルク


▲ 5020-029

ユニバーサルドリル
アタッチメント

▲ 5020-027

ワイヤードライバー
フィグゼーションハンドピース

デフォルト
設定ボタン

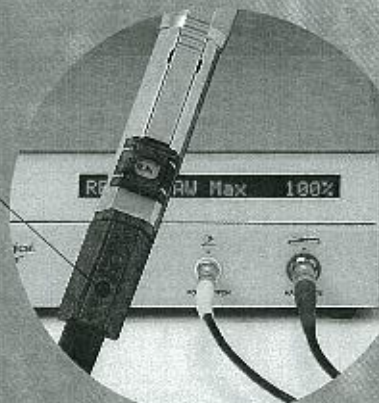


デフォルトスピード設定値変更可能
設定したスピードまでの間で、無断変速が行えます。

スロットルバー取外し可能



ハンドスイッチ・フットスイッチ使用可能
ハンドスイッチでの操作に加えフットスイッチでも操作ができます。


SYSTEM

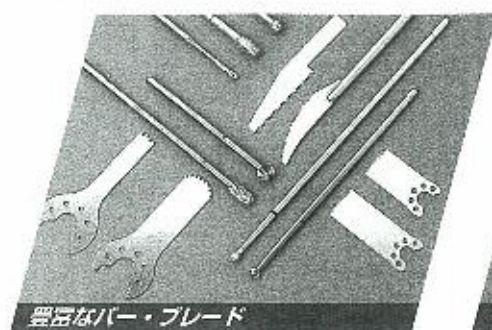

豊富なバー・ブレード



多彩なアタッチメント

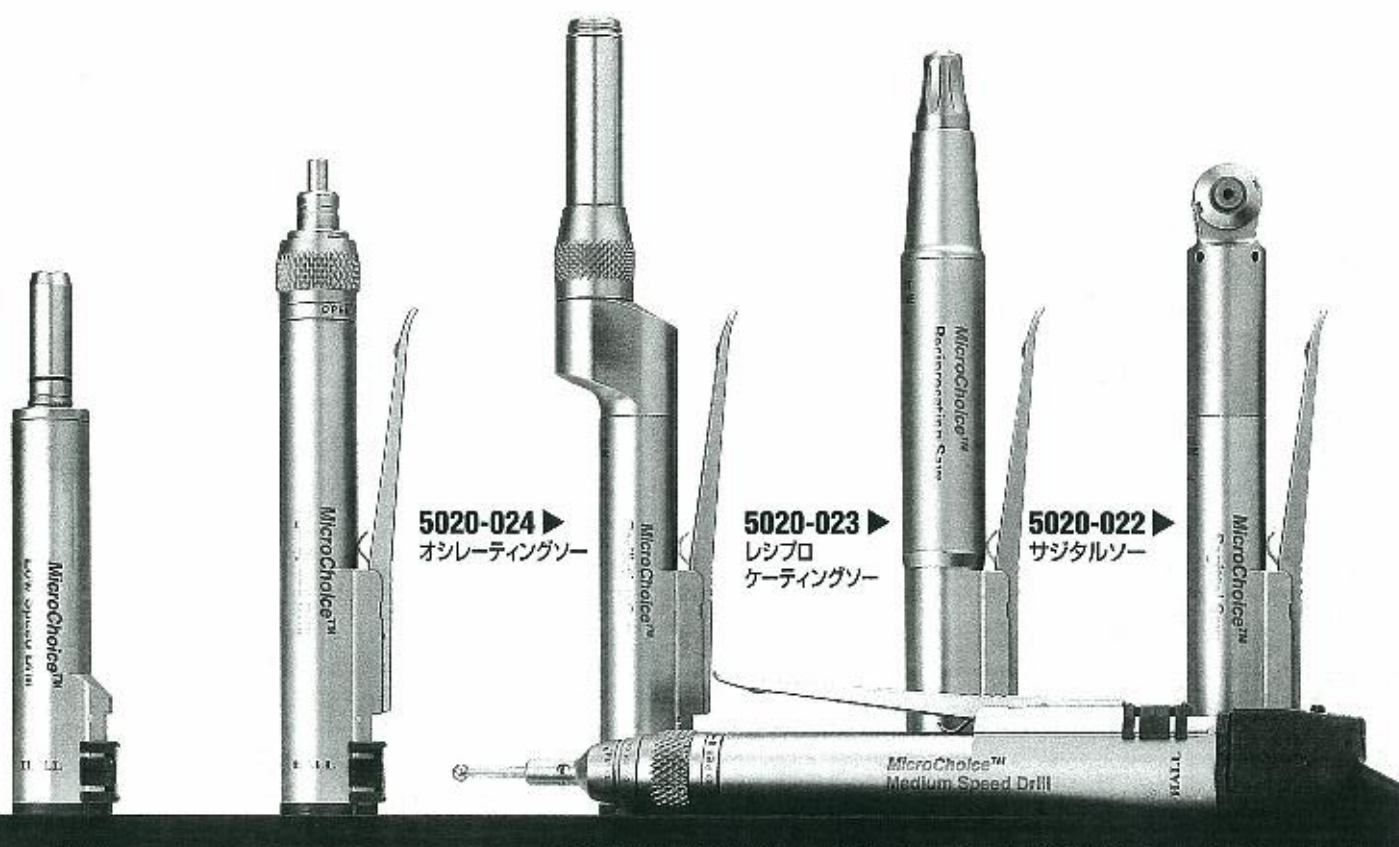

▲ 5020-026
ロースピードドリル


▲ 5020-025
ハイスピードドリル

▲ 5020-021
ミディアムスピードドリル

5020-024 ▶
オシレーティングソー

5020-023 ▶
レシプロ
ケーティングソー

5020-022 ▶
デジタルソー

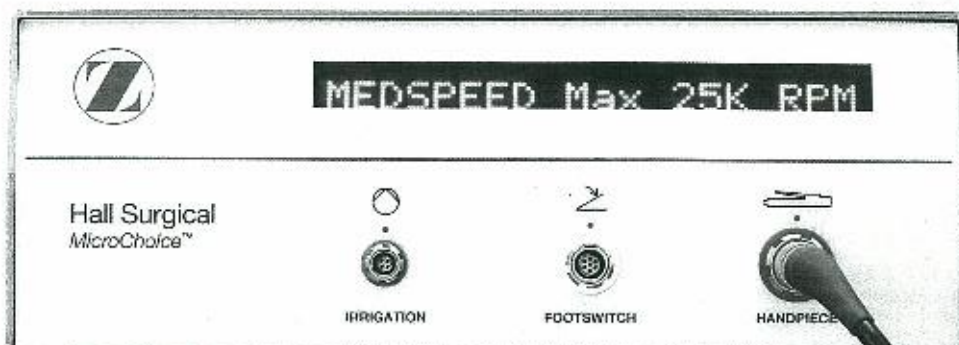

▲ 5020-020
コントローラー (ハンドピースコード付属)

ORDERING INFORMATION

承認番号 20900BZY00150000

カタログNo.	品名	規格/タイプ
5020-020	マイクロチョイス コントローラー	定格電力:100-120V, AC/周波数:50-60Hz/消費電力:250W
5020-021	マイクロチョイス ミディアムスピードドリル	最高回転数:25,000rpm/スピード設定:1,000~25,000rpmの範囲で2,000rpm単位/トルク:6in.oz
5020-022	マイクロチョイス サジタルソー	最高回転数:20,000cpm/スピード設定:20~100%の範囲で10%単位/ストローク:4"
5020-023	マイクロチョイス レシプロケーティングソー	最高回転数:17,000cpm/スピード設定:20~100%の範囲で10%単位/ストローク:1/10in. (2.54mm)
5020-024	マイクロチョイス オシレーティングソー	最高回転数:25,000cpm/スピード設定:20~100%の範囲で10%単位/ストローク:8"
5020-025	マイクロチョイス ハイスピードドリル	最高回転数:100,000rpm/スピード設定:10,000~100,000rpmの範囲で10,000rpm単位/トルク:2in.oz
5020-026	マイクロチョイス ロースピードドリル	最高回転数:ドリルヘッド:2,500rpm/スクリュー/タップヘッド:30rpm
		スピード設定:ドリルヘッド:250~2,500rpmの範囲で250rpm単位/スクリュー/タップヘッド:2~30rpmの範囲で2rpm単位
		トルク:ドリルヘッド:15in.oz スクリュー/タップヘッド:スクリュー25in.oz/タップ正回転:55in.oz/逆回転:60in.oz
5020-027	マイクロチョイス ワイヤードライバー フィグゼーションハンドピース	最高回転数:1,000rpm順回転/逆回転/スピード設定:100~1,000rpmの範囲で100rpm単位/キャニュレーション:3.2mm
5020-028	ワイヤードライバー アタッチメント	最高回転数:1,000rpm順回転/逆回転/スピード設定:100~1,000rpmの範囲で100rpm単位/キャニュレーション:0.7~1.6mm
5020-029	ユニバーサルドリル アタッチメント	最高回転数:1,000rpm順回転/逆回転/スピード設定:100~1,000rpmの範囲で100rpm単位/キャニュレーション:3.2mm
5020-030	ジャコブスチャック アタッチメント	最高回転数:1,000rpm順回転/逆回転/スピード設定:100~1,000rpmの範囲で100rpm単位
5020-031	ジャコブスチャック アタッチメント ハイトルク	最高回転数:275rpm順回転/逆回転/スピード設定:25~275rpmの範囲で25rpm単位
5020-053	マイクロチョイス フットスイッチ	
5020-060	マイクロチョイス バーガード	ミディアム
5020-061	マイクロチョイス バーガード	ロング
5020-062	マイクロチョイス バーガード	エクストラロング
5020-067	マイクロチョイス バーガード	ラミネクトミー
5020-068	マイクロチョイス バーガード	レトラクター
5020-063	マイクロチョイス アングルアタッチメント	20°
5020-064	マイクロチョイス アングルアタッチメント	20° XL
5020-065	マイクロチョイス アングルアタッチメント	70°
5020-066	マイクロチョイス アングルアタッチメント	90°
5020-034	マイクロチョイス アングルアタッチメント	デンタルインプラントドリルヘッド
5020-035	マイクロチョイス アングルアタッチメント	デンタルインプラントスクリュー/タップヘッド
5020-069	マイクロチョイス アングルアタッチメント	70° デンタルヘッド
5020-058	XLハンドピースレバー	
5020-048	マイクロE アダプター	
5020-055	イリゲーションコード	



5020-053
マイクロチョイス
フットスイッチ



5040-039
イリゲーション
ポンプ
(イリゲーションコード 5020-055をお使い下さい)

ハンドピースの材質は、ステンレス鋼です。

*本カタログに掲載の仕様・形状は改良等のため予告なしに変更することがあります。



ブリストル・マイヤース スクイブ株式会社
ジンマー事業部

本社	〒103-1327 東京都新宿区西新宿8丁目5番1号	新橋7丁目77-27F	TEL 03-5323-8500 (代表)
北海道営業所	〒060-0817 札幌市北区北7条西4丁目12番地	ニッセイMKビル8F	TEL 011-716-4221 (代表)
東北営業所	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1丁目15番3号	JAビル別館3F	TEL 022-263-3771 (代表)
北関東営業所	〒330-0002 大宮市宮町2丁目23番地	巻盛ビルA館6F	TEL 048-044-7289 (代表)
東京支店	〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目20番10号	水鏡TKビル3F	TEL 03-3816-1294 (代表)
神奈川営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜3丁目24番3号	新横浜東武AKビル5F	TEL 045-472-2100 (代表)
静岡営業所	〒412-0006 静岡県静岡市中相1555番地の1		TEL 0550-69-3511 (代表)
名古屋営業所	〒461-0025 名古屋市東区東桜2丁目10番00号	EPセントラルビル6F	TEL 052-937-9621 (代表)
北陸営業所	〒950-0022 金沢市北安江1丁目3番24号	ピア全沢5F	TEL 0762-63-5703 (代表)
関西支店	〒532-0003 大阪市淀川区宮田3丁目5番36号	新大阪駅前ビル11F	TEL 06-394-1230 (代表)
岡山営業所	〒720-0903 岡山市北区8番29号	三井生命岡山ビル413F	TEL 086-233-2205 (代表)
広島営業所	〒730-0036 広島市中区柳町3番17号	サンコート東館ビル9F	TEL 082-241-8020 (代表)
九州営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2丁目17番1号	ニオカビル3F	TEL 092-474-1292 (代表)
御殿場事業所	〒412-0006 静岡県御殿場市中相1555番地の1		TEL 0550-69-8500 (大代表)