



アシストアーム
AssistArm™ 患肢用ポジショナー


患肢の固定を簡単に実現できます。



Y-KNOT® FLEX 1.3&1.8mm
オールスーチャーアンカー



POPLOK®
ノットレススーチャーアンカー

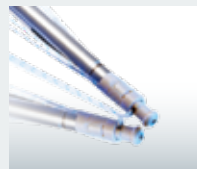

HALL 50™
デュアルトリガーモジュラー式ハンドピース





AssistArm™ — 広範囲な整形外科手術における患肢ポジショニングへの独自のアプローチ

油圧式駆動システム

- ・ フットペダルを踏み込むことで AssistArm™ のロックと解除ができ、容易に患肢を動かす、固定することができます。
- ・ 油圧式の為、外部の電源は不要です。バッテリー充電は必要ありません。
- ・ 稼働時間の制限はありません。術後に充電する必要はありません。
- ・ 加圧空気の導管を使用していないため、スリム化を実現しました。

操作性の向上を図る設計

- ・ 軽量の炭素繊維を使用する事により、取り回しが容易になりました。
- ・ 脱着が簡単になる装着部設計を採用しました。
- ・ ユニバーサルクランプは、手術台のレールに簡単に取り付けることができます。
- ・ ディスポーザブル滅菌キットは、手術室の準備や洗浄の手間を省きます。

患肢の安定性

- ・ 患肢は徒手で自由にポジショニングする事ができます。
- ・ 清潔野を損なうことなく、適切な位置にポジショニングする事ができます。

必要部位ごとにアタッチメントを選択します。

■ 肩関節 — ビーチチェア体位と側臥位（ラテラル用）

アームの移動中に伝わる感触により靭帯や筋肉の緊張を評価したり、可動域を検証することができるビーチチェア体位用。



AA-PSN1-000-00
手術用ポジショナー



AA-CON2-500-00
コネクター



AA-ASBC-200-00
アームサポート

患肢の
ポジショニング



肩用アームサポートと
牽引ユニット



ビーチチェア体位



側臥位

- ・側臥位(ラテラル用)で牽引ユニットを使用する場合、医師は必要なとき必要な場所で高精度な牽引および回旋を行えます。



AA-PSN1-000-00
手術用ポジショナー




AA-TRAC-400-00
牽引ユニット



AA-ASLD-500-00
アームサポート

- ・手術時に患肢を押さえる必要がありません。
肩関節鏡視下手術や肩関節直視下手術、上肢の外傷、および人工肩関節全置換術に使用できます。

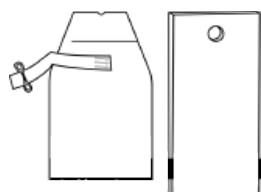

(膝関節と共通)

AA-SKKI-T10-00
滅菌キット
(専用ドレープ・アームサポート用パッド固定テープ)

■ 膝関節 – 部位を十分に展開するための高精度なポジショニングを実現

膝関節鏡視下手術 (前十字靭帯 (ACL)、関節半月、外傷)、膝関節単顆置換術、および人工膝関節全置換術に使用できます。

- ・適切な離開を維持できます。
- ・患肢の過屈曲、最大伸展を行えます。



膝関節手術




AA-PSN1-000-00
手術用ポジショナー



AA-CON2-500-00
コネクター



AA-K600-000-00
膝関節用アタッチメント

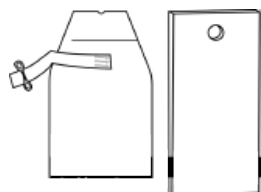

(肩関節と共通)

AA-SKKI-T10-00
滅菌キット
(専用ドレープ・アームサポート用パッド固定テープ)



足関節鏡視下手術

■ 足関節 - 牽引を片手で出来ます。

足関節の手術では、多くの場合、手術部位に十分にアクセスするためには大きな牽引力を必要とします。足関節用アタッチメントおよび牽引ユニットにより、牽引のコントロールを片手で行うことができます。




AA-PSN1-000-00
手術用ポジショナー



AA-TRAC-400-00
牽引ユニット



AA-A700-000-00 ※
アングルアタッチメント

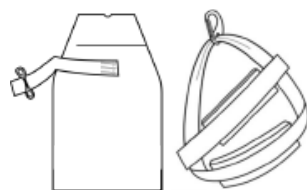

AA-A-KIT10
滅菌キットアングル用
(専用ドレープ・ストラップ)

Ordering Information

品名	カタログ No.
AssistArm 手術用ポジショナー	AA-PSN1-000-00
AssistArm コネクター (ビーチチェア体位・膝関節用)	AA-CON2-500-00
AssistArm 牽引ユニット (肩側臥位体位・足関節用)	AA-TRAC-400-00
AssistArm 肩関節用アームサポート (ビーチチェア体位用)	AA-ASBC-200-00
AssistArm 側臥位用アームサポート	AA-ASLD-500-00
AssistArm 膝関節用アタッチメント	AA-K600-000-00
AssistArm アングルアタッチメント	AA-A700-000-00
AssistArm 肩関節および膝関節用滅菌キット	AA-SKKI-T10-00
AssistArm 滅菌キットアングル用	AA-A-KIT10

販売名：AssistArm ポジショナー
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228CD0039

AssistArm™ の詳細については、弊社担当営業にお問い合わせください。



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<http://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス (商品のご注文) Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821
- 製品のお問合せ Tel. 03-6402-6619

営業拠点: 札幌、仙台、北関東、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、福岡