


**ZEOS™**  
Clearly More

**ZEOS™**  
Scope and Sheath System



## 4K アースロスコープ 4 mm

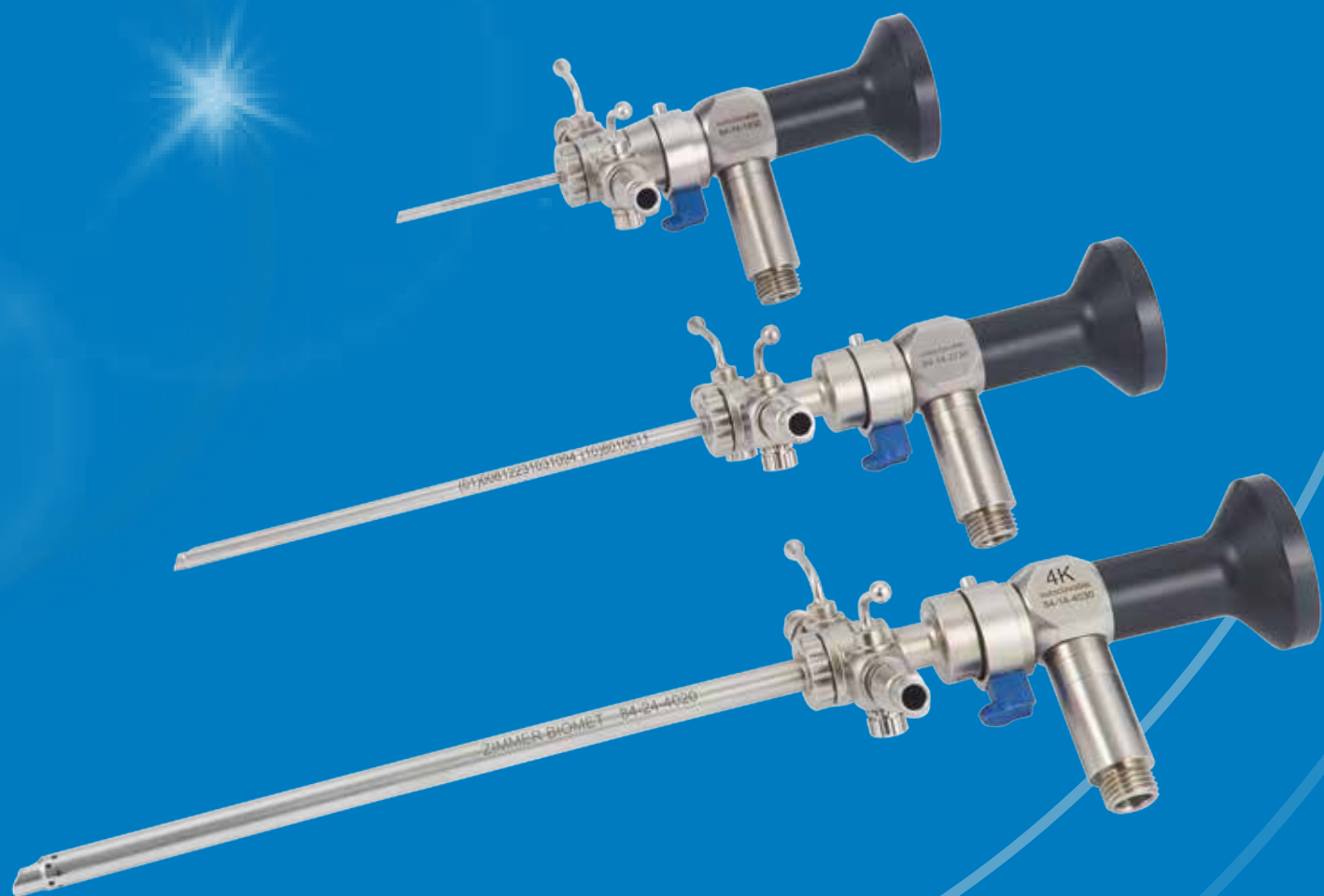

ZEOS 4K アースロスコープは、従来のHD スコープよりも透過率が高く、レンズ収差が少ないレンズを採用し、より明るく高精彩な 4K 画質を提供します。

アイカップ

Cマウント

アイカップ型 Cマウント型

0°	84-14-4000	84-14-4100
30°	84-14-4030	84-14-4130
70°	84-14-4070	84-14-4170

## アースロスコープ 2.7 mm



狭い部位でも均一な明るさを確保し、操作性と良好な描写性能を実現した小関節用スコープです。

アイカップ

Cマウント

アイカップ型 Cマウント型

0°	84-14-2700	84-14-2800
30°	84-14-2730	84-14-2830
70°	84-14-2770	84-14-2870

## ZEOS™ Scope and Sheath System

ZEOS スコープは、レンズ周辺部の光透過率を上げ高い色彩再現性と画質の向上を実現しました。また、シースは大型のワンタッチ式ボタンを採用し、簡単にスコープを着脱できるようになっています。さらに良好な視野を保つために効率的な還流が行える設計になっています。オートクレーブ滅菌及びプラズマ滅菌に対応しています。

## アースロスコープ 1.9 mm

歪みの少ないロッドレンズを採用し、細い径でも明るさと見やすさを実現しました。  
細径が必要な検査・治療にご使用ください。

アイカップ

Cマウント



アイカップ型 Cマウント型

	アイカップ型	Cマウント型
0°	84-14-1900	84-14-2000
30°	84-14-1930	84-14-2030



## ZEOS Cマウントズームカプラー

ZEOS Cマウントズームカプラーは、光学的に2倍までシームレスな拡大が可能です。  
光学ズームはデジタルズームと比べて、元画像の画質のまま拡大できるため、奥深い部位の視察や小径スコープ使用時に非常に有効です。



84-10-2220 Cマウントズームカプラー

# ダブルコックシース&オブチュレーター

## 4mm スコープ用




84-24-4020  
6.2MM ダブルコックシース



84-24-4032  
4.2MM ブラントオブチュレーター

## 2.7mm スコープ用

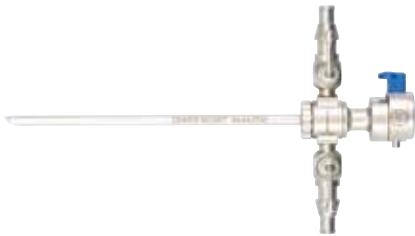

84-24-2720  
3.8MM ダブルコック  
シース



84-24-2722  
2.9MM ブラントオブチュレーター


## 1.9mm スコープ用



84-24-1920  
2.5MM ダブルコックシース



84-24-1922  
2.0MM ブラントオブチュレーター

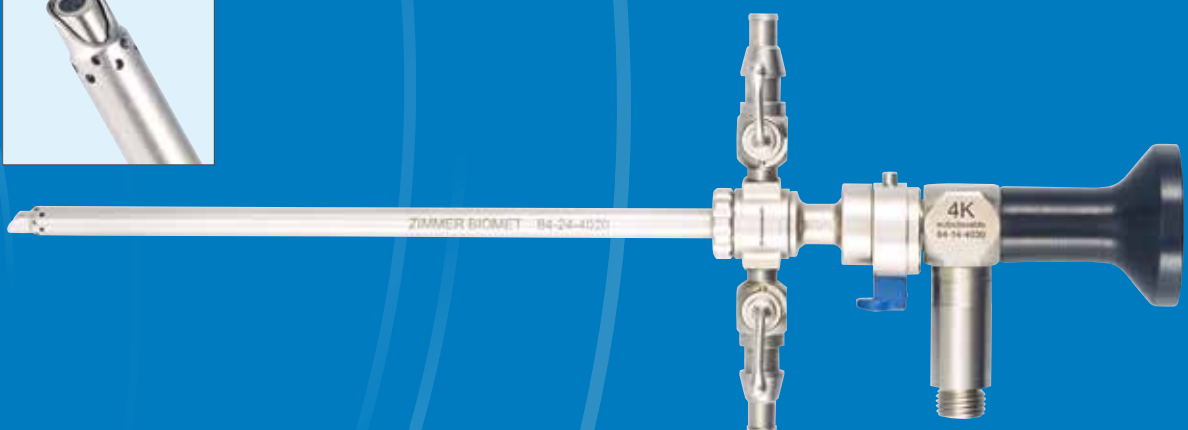

## ZEOS™ Ordering Information

### 4K アースロスコープ 4mm

カタログ No.	品名	規格
84-14-4000	4K アースロスコープ アイカップ 4MM 0°	直径 4.0 mm 視野角 105° 有効長 0° = 173.9mm 30° = 175.0mm 70° = 175.8mm
84-14-4030	4K アースロスコープ アイカップ 4MM 30°	
84-14-4070	4K アースロスコープ アイカップ 4MM 70°	
84-14-4100	4K アースロスコープ C マウント 4MM 0°	
84-14-4130	4K アースロスコープ C マウント 4MM 30°	
84-14-4170	4K アースロスコープ C マウント 4MM 70°	
84-24-4020	6.2MM ダブルコックシース	
84-24-4032	4.2MM ブラントオブチュレーター	

### アースロスコープ 2.7mm

カタログ No.	品名	規格
84-14-2700	アースロスコープ アイカップ 2.7MM 0°	直径 2.7 mm 視野角 80° 有効長 0° = 139.0mm 30° = 140.0mm 70° = 141.5mm
84-14-2730	アースロスコープ アイカップ 2.7MM 30°	
84-14-2770	アースロスコープ アイカップ 2.7MM 70°	
84-14-2800	アースロスコープ C マウント 2.7MM 0°	
84-14-2830	アースロスコープ C マウント 2.7MM 30°	
84-14-2870	アースロスコープ C マウント 2.7MM 70°	
84-24-2720	3.8MM ダブルコックシース	
84-24-2722	2.9MM ブラントオブチュレーター	

### アースロスコープ 1.9mm

カタログ No.	品名	規格
84-14-1900	アースロスコープ アイカップ 1.9MM 0°	直径 1.9 mm 視野角 65° 有効長 0° = 60.0mm 30° = 60.5mm
84-14-1930	アースロスコープ アイカップ 1.9MM 30°	
84-14-2000	アースロスコープ C マウント 1.9MM 0°	
84-14-2030	アースロスコープ C マウント 1.9MM 30°	
84-24-1920	2.5MM ダブルコックシース	
84-24-1922	2.0MM ブラントオブチュレーター	

### カプラー

カタログ No.	品名	規格
84-10-2220	C マウント ズームカプラー	

販売名：ZEOS カメラシステム  
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0015  
規制区分：特定保守管理医療機器  
一般の名称：内視鏡ビデオ画像プロセッサ（外部電源式内視鏡用光源装置 / 内視鏡用ビデオカメラ）

販売名：ZEOS スコープ  
医療機器製造販売認証番号：302ADBZX00001000  
規制区分：特定保守管理医療機器  
一般の名称：硬性関節鏡（硬性鼻腔鏡）

販売名：ZEOS スコープ 器械  
医療機器製造販売届出番号：13B1X10228SG0014  
規制区分：一般医療機器  
一般の名称：内視鏡用シース（内視鏡用オブチュレータ / 内視鏡用部品アダプタ）



## ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.03-6700-1071  
Fax.0463-30-4821

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡