

# Delfi PTSii Tourniquet System

デルファイ ピーティーエスツー タニケットシステム

iNDEPENDENCE & iNTELLIGENCE



# Delfi PTSii Tourniquet System

INNOVATION TO SURGERY

PTS ii は小型で持ち運び自在な電動式タニケットシステムです。片手に乗るコンパクトなサイズは、オペ室の貴重なスペース確保に貢献します。

PTS ii は、ジンマー バイオメットの従来のシングルポート式タニケットカフと互換性があり、組み合わせて使用可能です。



## 直感的に操作できる ユーザーインターフェース

フルカラータッチパネルを搭載し、シンプルで直感的な操作で使用可能です。

## 進化したセーフティ機能

カフ圧と操作時間を大きくはっきりと表示するほか、機器本体がセルフテストとキャリブレーションを実施し、異常時にはランプと音でお知らせします。

また、予期しないカフ外れを防止するため、本体とホースの確実な接続を維持する CPC コネクターを使用しています。

## 圧力設定セーフティ機能 (インターロックシステム)

高いカフ圧を設定する場合に安全機能としてインターロックシステムが作動します。これはカフ圧を 475 mmHg 以上に設定しようとした場合に、一度制限を設けて確認する機能です。医師の指示確認のもと、患者様にとって必要な場合には、600 mmHg まで設定することができます。これにより、誤って高い圧力を設定するリスクの回避を期待できます。

# Delfi PTSii Tourniquet System

INNOVATIVE EXCELLENCE AND  
INTELLIGENT FEATURES

## 長い内蔵電池寿命

最長 10 時間の内蔵電池による操作が可能です。

\* 基本的には電源に接続した状態でご使用ください。

## カフ空気漏れテスト機能を搭載

米国周手術期看護師協会（AORN）のガイドラインで推奨されている、術前・術後のカフの状態・空気漏れ検査が可能なカフ空気漏れテスト機能を搭載しています。

## 手術中のカフ空気漏れ検出機能を搭載

手術中のカフ、カフホース、コネクタ部からの空気漏れの異常を常時モニタリングし、異常時にはランプと音でお知らせします。

## 製品仕様

高さ：180 mm (7.0 インチ)      幅：120 mm (4.7 インチ)

奥行：110 mm (4.3 インチ)      重量：1.26 kg (44.5 オンス)

カフ圧範囲：20 - 600 mmHg、1 mmHg 単位

圧力精度：± 2mmHg

時間アラーム設定値範囲：5 - 240 分、1 分単位

加圧速度：30 インチ (76cm) の大腿部に 34 インチ (86cm) のカフを巻いた場合、  
5 秒未満で 350 mmHg まで加圧します。

脱気速度：30 インチ (76cm) の大腿部に 34 インチ (86cm) のカフを巻いた場合、  
10 秒未満で 10 mmHg 未満まで脱気します。



## Ordering Information

カタログ No.	品名	規格
60-1000-101-00	Delfi PTSii タニケットシステム	カフ接続ホース(白)、電源アダプター、電源コード各1本つき、ブラケット

### 付属品

カタログ No.	品名	規格
60-4022-001-00	タニケットスタンド	高さ:110~180cm、脚巾:71cm、5脚*
60-1908-001-00	ATSタニケットバスケット	300(W)X460(D)X130(H)mm*
60-1000-212-00	カフ接続ホース(白)	長さ:3.4m、ルアーロック用アダプター付き

販売名: Delfi PTSii タニケットシステム 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228SG0010  
\*薬事法規対象外

### リユースザブルカフ

#### シングルポート、シングルカフ(A.T.S750, PTSii用)

カタログ No.	品名	仕様	リボン色	入数
60-7600-001-00	20cm インフラ/ATS750 シングルカフ	82(W) X 200(L)	白	1個
60-7600-002-00	30cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 310(L)	水色	1個
60-7600-003-00	46cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 460(L)	赤	1個
60-7600-004-00	61cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 610(L)	緑	1個
60-7600-005-00	76cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 760(L)	青	1個
60-7600-006-00	86cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 860(L)	茶	1個
60-7600-007-00	107cm インフラ/ATS750 シングルカフ	107(W) X 1,070(L)	エンジ	1個
60-8000-001-00	エクストラ スモールアダルトカフ	76(W) X 378(L)	黄	1個
60-8000-002-00	スモールアダルトカフ	89(W) X 450(L)	灰	1個

販売名: ATS750 タニケットシステム 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228SG0004

### ディスポーザブルカフ

#### シングルポート、シングルカフ、スリーブなし(A.T.S.750,PTSii用)

カタログ No.	品名	仕様	リボン色	スリーブ	滅菌	使用回数	入数
60-7075-101-00	20cmシングルポートディスポカフ	70(W)X222(L)	白	なし	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-102-00	30cmシングルポートディスポカフ	105(W)X324(L)	水色				
60-7075-103-00	46cmシングルポートディスポカフ	105(W)X479(L)	赤				
60-7075-104-00	61cmシングルポートディスポカフ	105(W)X635(L)	緑				
60-7075-105-00	76cmシングルポートディスポカフ	105(W)X784(L)	青				
60-7075-106-00	86cmシングルポートディスポカフ	105(W)X891(L)	茶				
60-7075-107-00	107cmシングルポートディスポカフ	105(W)X1092(L)	エンジ				

#### シングルポート、シングルカフ、スリーブ付(A.T.S.750, PTSii用)

60-7075-152-00	30cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X324(L)	水色	スリーブ付	滅菌済み	単回使用	1箱 10個入り
60-7075-153-00	46cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X479(L)	赤				
60-7075-154-00	61cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X635(L)	緑				
60-7075-155-00	76cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X784(L)	青				
60-7075-156-00	86cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X891(L)	茶				
60-7075-157-00	107cmシングルポートディスポカフW/S	105(W)X1092(L)	エンジ				

販売名: 滅菌済みカフ 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228SG0011

### 延長ホース

カタログ No.	品名	滅菌	使用回数	入数
60-4009-101-00	シングルエクステンションホース W/ポジティブロッキングコネクター	滅菌済み	単回使用	1箱20個入り


販売名: 滅菌済みカフ 医療機器製造販売届出番号: 13B1X10228SG0011



タニケットスタンド



タニケットバスケット

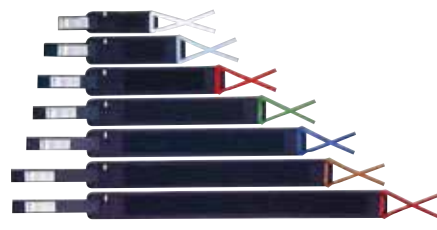

リユースザブルカフ



ディスポーザブルカフ

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。



### ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス(商品のご注文) ..... Tel.0463-30-4801  
Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ ..... Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ ..... Tel.03-6402-6604



✉ [SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com](mailto:SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com)

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡