

JACE Universal CPM K100-A

ジェイスユニバーサル CPM II

CPM(Continuous Passive Motion)持続的他動運動器



ジェイスユニバーサル CPM II

タフな構造に簡便な操作性を
搭載した使い易いCPM(持続的他動運動)器械です。



4本からなるタフな支柱ヒンジにより屈曲可動域 (ROM)が130°まで可動可能

ROM	-3° ~130°
速度	1往復2分~60分
ポーズ設定	0~9分59秒
運転時間	9999分内で任意に設定可能

特徴

Feature

- 患者用安全スイッチ付
- 衝撃に強くタフなアルミニウムフレーム構造
- 持ち運び用ハンドル付
- 簡単クリーニングが可能なプラスチック製ボディ
- 患肢にあわせて大腿部、足底屈、背屈の支持をするサポートプレート进行调整して利用
- ゆとりあるサポートプレート構造によりブレース装着でも使用可能


選べる2タイプのソフトグッズ

- ジェイスソフトグッズキット(厚手)
- ジェイスソフトグッズセットクール(薄手)



Point 1

独自開発の「ウォームアップ機能」により
開始時の疼痛と負担を軽減します。

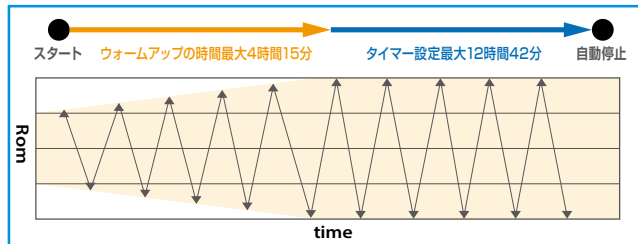


ウォームアップ機能とは…

ウォームアップ(ならし運転)時間と目標となるROMを設定すると目標ROMの50%から作動がスタートし、ウォームアップ終了時に目標ROMの100%に達する機能であり、段階的にゆっくりと作動が始まり急な伸展による痛みを防ぎます。

Point 2

独自の「保護機能」反転トルク作用により
急激な過伸展を防ぎます。

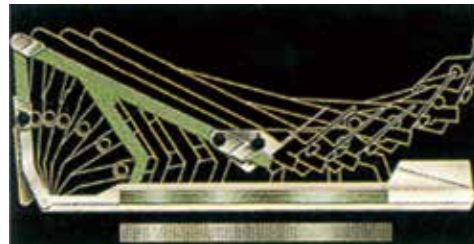

保護機能とは…

始めの2往復運動時に患肢の負荷を記憶し、その後の動作時に異常な負荷を感知すると自動的に保護機能が動き反転(作動方向とは逆の方向への運動)をします。角度の増減を一定に保ち急激な過伸展を防ぎ安全に使用できます。

Ordering information

カタログNo. JC-7725-002-00	品名 ジェイスユニバーサルCPM II-1 付属品 ・安全スイッチ ————— 1 ・コントローラー ————— 1 ・電源コード ————— 1 ・付属品用バッグ ————— 1 ・固定ベルト ————— 1 ・ジェイスソフト グッズキット(厚手) ——— 1	仕様 ・全長:101cm ・幅:30.48cm ・重量:11.25kg(本体のみ) 電気的定格 ・適応下肢長:48.3cm~114.3cm ・定格電圧:AC100V ・周波数:50/60Hz ・消費電力:30w	ソフトグッズシリーズ(別売) JC-7725-001-11 ジェイスソフトグッズキット JC-7725-001-14 ジェイスソフトグッズセットクール 内容物 下腿スリング、大腿スリング、足底板用パッド…各1本 固定用ストラップ…2本
---------------------------	--	---	--

販売名:ジェイス ユニバーサル CPM システムII
医療機器製造販売認証番号:225ADBZX00115000

カタログ記載内容は、カタログ作成時点の内容に基づいています。製品の在庫や販売状況に関しては、下記までお問合せください。



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600(代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

- カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821
- 修理のお問合せ …………… Tel.0463-30-4805
- 製品のお問合せ …………… Tel.03-6402-6604



✉ SurgicalEquipment.Japan@zimmerbiomet.com

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡