

エース 6.5 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム

エース 8.0 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム

キャニュレイテッド  
キャンセラス ラグスクリュー

- セルフフリーミング、セルフタッピングのデザインは、スクリューが挿入し易く手術時間短縮につながります。
- 3.2mmの太いガイドピンにより、正確な位置にスクリューを挿入できます。
- リバース ラジアル タッピング フルーツは、抜去時に逆回転のタッピングを行います。

6.5mm キャニュレイテッド  
キャンセラス SCFE ラグスクリュー

- SCFE スクリューは6.5mmのキャニュレイテッド キャンセラス スクリューで、大腿骨頭すべり症治療専用にデザインされました。
- セルフフリーミング、セルフタッピングのデザインと、太くて曲がりにくい3.2mmのガイドピンにより、挿入し易くなっています。
- リバースラジアルタッピングフルーツが付いています。
- インサーターは、専用にデザインされたスクリューの六角ヘッドに、強固に固定されます。
- エクストラクターロックのネジがスクリューを固定し、引き寄せながら抜去することができます。



●このデバイスを頸椎、胸椎、腰椎の後方要素(椎弓根)の  
スクリュー固定に用いることは認められていません。  
●ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。

# ACE Titanium Cannulated Cancellous Screw System

エース 6.5 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム

エース 8.0 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム


## ▶ 主な適応部位

- 大腿骨頸部骨折
- 大腿骨遠位および脛骨の骨幹端骨折
- 脛骨高原骨折
- 上腕骨、肘頭、肩甲骨、踵骨の骨折
- 仙骨、臼蓋、骨盤輪の骨折
- 仙腸関節の固定
- 足部および足関節の固定

## ▶ 各種試験結果比較グラフ

COMPETITIVE PULL-OUT DATA

	ネジ山径	シャフト径	スレッド	PULL-OUT FORCE(N) OSTEOPOROTIC BONE
ACE 8.0mm	8.0mm	5.5mm	24mm	3690
ACE 6.5mm	6.5mm	5.0mm	22mm	1855

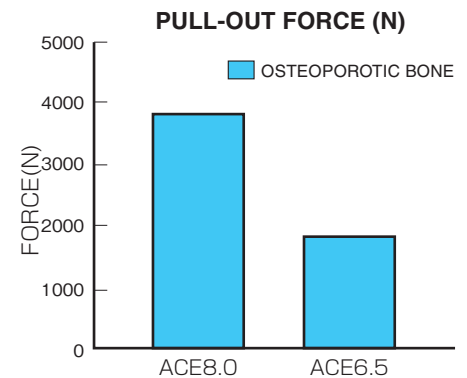

THE EFFECT OF THREAD DESIGN ON THE HOLDING POWER OF LARGE CANCELLOUS SCREWS  
Orthopaedic Research Laboratory Los Angeles, CA

## ▶ インプラント一覧表

製品番号	品名	規格
14196-X	6.5mm キャニュレイテッド キャンセラス ラグスクリュー 22mmスレッド	X : 25mm~120mm(5mm刻み)
14188-X	6.5mm キャニュレイテッド キャンセラス SCFEラグスクリュー 20mmスレッド	X : 50mm~105mm(5mm刻み)
14097	6.5 フラット ワッシャー	
14126	バットレス プレート 135°	
14192-X	8.0mm キャニュレイテッド キャンセラス ラグスクリュー 24mmスレッド	X : 50mm~110mm(5mm刻み)
14191	8.0 フラット ワッシャー	

バットレス プレート135°  
刺入部が粉碎している場合や、  
骨粗鬆症の場合にお使い下さい。



販売名: エース 6.5 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム  
販売名: エース 8.0 キャニュレイテッド キャンセラス スクリュー システム  
販売名: スクリュー システム

承認番号: 21100BZY00291000  
承認番号: 21100BZY00401000  
承認番号: 21700BZY00574000

# BIOMET®

One Surgeon. One Patient.™

バイオメット・ジャパン株式会社

本社  
〒105-0011  
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
TEL 03-5404-5670代 FAX 03-5404-5677

東京営業所  
〒105-0011  
東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー16階  
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666

大阪第一営業所 / 大阪第二営業所  
〒532-0011  
大阪市淀川区西中島7丁目4番17号 新大阪上野東洋ビル11階  
TEL 06-6100-3960代 FAX 06-6100-3270

仙台営業所  
〒980-0011  
仙台市青葉区上杉2丁目3番7号 K2小田急ビル7階  
TEL 022-212-7331代 FAX 022-212-7332

バイオメット・ジャパン 新砂物流センター  
〒136-0075  
東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II 5階  
トラウマ事業部お客様窓口  
TEL 03-5404-5655 FAX 03-5404-5666  
営業拠点: 札幌、北関東、吉祥寺、横浜、名古屋、岡山、福岡  
<http://www.biomet.co.jp>

©2012 Biomet Japan. All trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.