

Retrograde
Femoral Nail



Tibial Nail

Phoenix Nail System

Phoenix Tibial Nail System




Phoenix Tibial Nail Specifications

フェニックス Tibial Nail はネイル遠位端より 4.5mm、10.0mm、15.6mm に遠位スクリューホールを設けてあります（数値はネイル遠位端よりスクリューホール中心位置）。



豊富なサイズバリエーション：中空ネイル径 7.5mm ～、長さ 240mm～420mm（20mm 刻み）

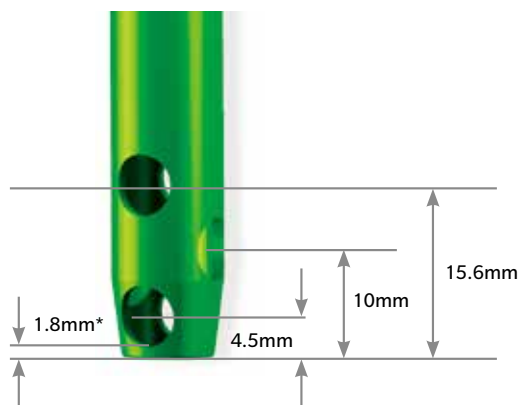



* 7.5mm ネイルの場合のみ 2.4mm

Tibial Nail

ネイル径	ネイル近位径
7.5mm、9mm、10.5mm	11mm
12mm	12mm

Featuring CoreLock Technology

CoreLock を採用しフェニックススクリューとネイルとの確実な固定を可能にしました。

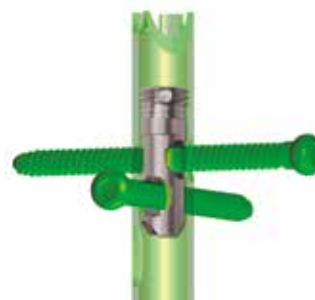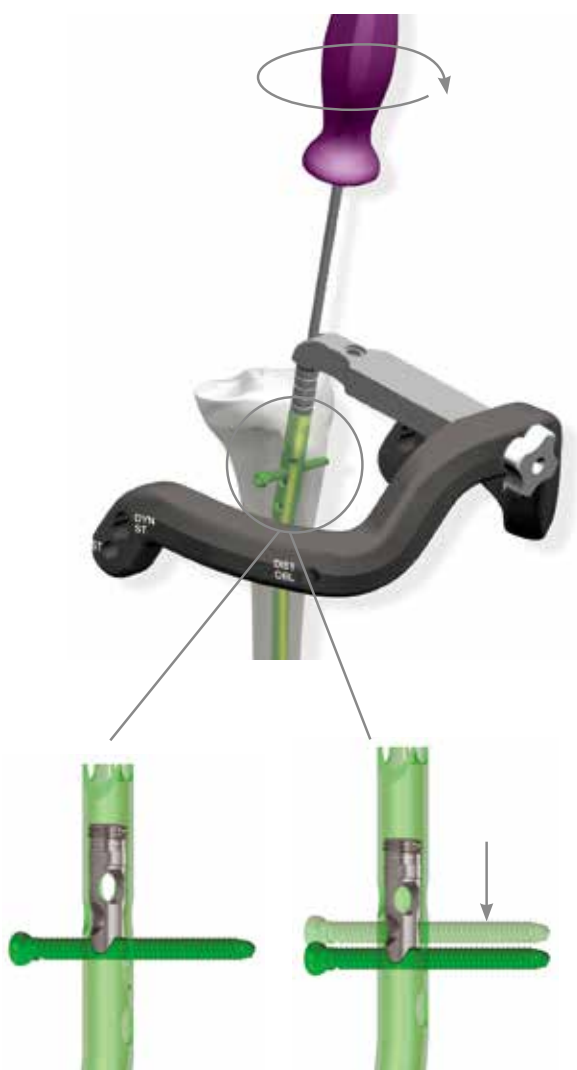


- 近位部のオブリークスクリュー 2 本を CoreLock にて固定可能です。

- ユニークな CoreLock テクノロジーにより 5.0mm の機械的コンプレッションが可能です。

Phoenix Retrograde Femoral Nail System


Featuring CoreLock Technology

- プリセットされている CoreLock により遠位スクリュー 4 本（2 本のトランスバース、2 本のオブリーク）を強固に固定し、遠位部の固定性を高める事が可能です。

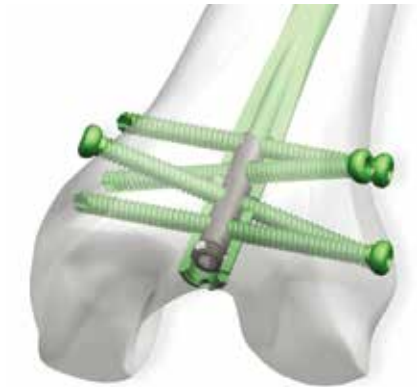

- チタン合金性で R1800 の曲率半径がついており、遠位端から 45.0mm の位置で 5° ベンドしています。
- ネイル径は 9.0mm、10.5mm、12.0mm、13.5mm の径から選択出来、長さは 240mm-460mm (20mm 刻み) より選択が可能です。


Phoenix Retrograde Nail Specifications

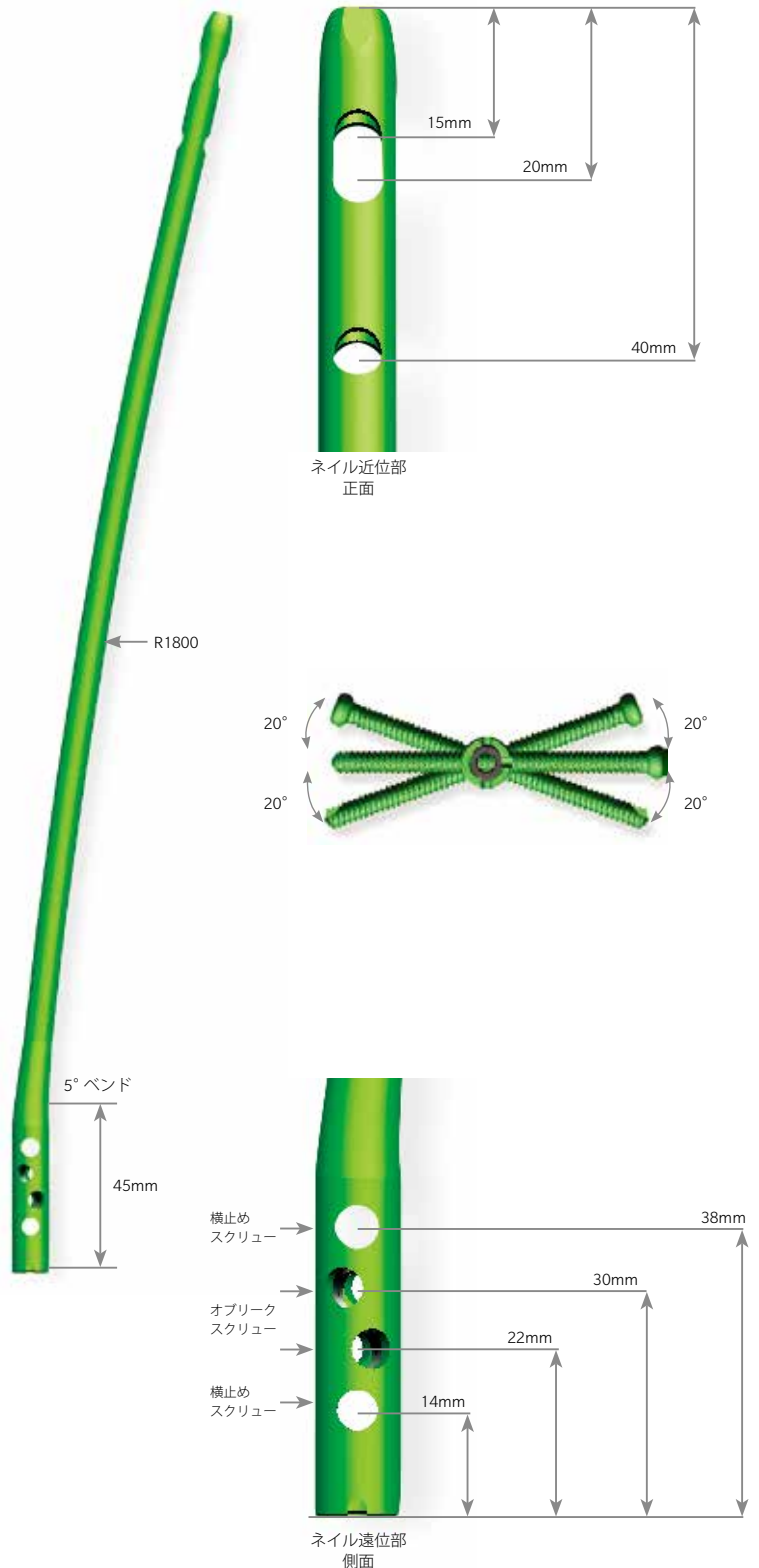

注：図は縮尺ではないので、参考としてのみ使用すること。

Phoenix Nail Technology

CoreLockとフェニックススクリューの接触面は鋸刃状の形状をしており、フェニックススクリューのネジ山・谷に確実に接触します。この特長により応力の集中を軽減しながら固定力を向上させています。また、フェニックススクリューの抜去が必要な場合でも CoreLock を緩めることなくフェニックススクリューの抜去が可能になりました。

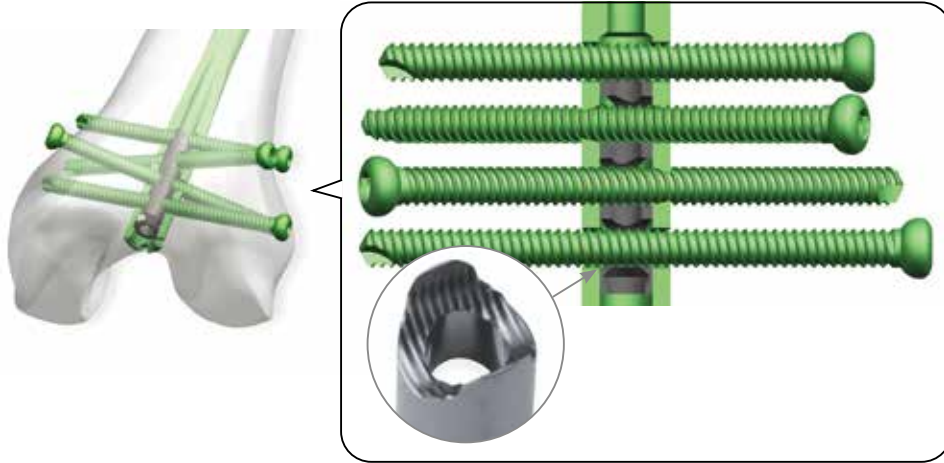

Featuring CoreLock Technology

Feature & Benefit

	Feature	Benefit	説明
CoreLock	ネイルとスクリューを面で固定します。	スクリューの固定力を向上しつつCoreLockを緩めることなくスクリューの抜去が可能です。	スクリュー抜去の必要性が生じた際にネイル挿入口を再度アプローチする必要がありません。

Featuring Target Arm

- 透過性能が高く操作性に優れたターゲットアームがさまざまな方向から透視可能なのでトランスバーススクリュー、オブリークスクリューの確実な挿入をサポートします。



Retrograde Femoral Nail

ネイル径	ネイル遠位径
9mm、10.5mm、12mm	12mm
13.5mm	13.5mm

Ordering Information

(※はオプションサイズです。詳しくは弊社営業担当者にお尋ね下さい。)

Nail

Phoenix Tibial Nails

カタログ番号	サイズ
※40024	7.5mm × 240mm
※40026	7.5mm × 260mm
※40028	7.5mm × 280mm
※40030	7.5mm × 300mm
※40032	7.5mm × 320mm
※40034	7.5mm × 340mm
※40036	7.5mm × 360mm
※40038	7.5mm × 380mm
※40040	7.5mm × 400mm
※40042	7.5mm × 420mm
※40324	9.0mm × 240mm
40326	9.0mm × 260mm
40328	9.0mm × 280mm
40330	9.0mm × 300mm
40332	9.0mm × 320mm
40334	9.0mm × 340mm
※40336	9.0mm × 360mm
※40338	9.0mm × 380mm
※40340	9.0mm × 400mm
※40342	9.0mm × 420mm
※40624	10.5mm × 240mm
40626	10.5mm × 260mm
40628	10.5mm × 280mm
40630	10.5mm × 300mm
40632	10.5mm × 320mm
40634	10.5mm × 340mm
※40636	10.5mm × 360mm
※40638	10.5mm × 380mm
※40640	10.5mm × 400mm
※40642	10.5mm × 420mm
※40924	12.0mm × 240mm
40926	12.0mm × 260mm
40928	12.0mm × 280mm
40930	12.0mm × 300mm
40932	12.0mm × 320mm
40934	12.0mm × 340mm
※40936	12.0mm × 360mm
※40938	12.0mm × 380mm
※40940	12.0mm × 400mm
※40942	12.0mm × 420mm

色調：ライトグリーン 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
販売名：フェニックスティビアルネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00613000

Phoenix Retrograde Femoral Nails

カタログ番号	サイズ
※14-444124	9.0mm × 240mm
※14-444126	9.0mm × 260mm
※14-444128	9.0mm × 280mm
※14-444130	9.0mm × 300mm
※14-444132	9.0mm × 320mm
※14-444134	9.0mm × 340mm
※14-444136	9.0mm × 360mm
※14-444138	9.0mm × 380mm
※14-444140	9.0mm × 400mm
※14-444142	9.0mm × 420mm
14-444224	10.5mm × 240mm
14-444226	10.5mm × 260mm
14-444228	10.5mm × 280mm
14-444230	10.5mm × 300mm
14-444232	10.5mm × 320mm
14-444234	10.5mm × 340mm
14-444236	10.5mm × 360mm
※14-444238	10.5mm × 380mm
※14-444240	10.5mm × 400mm
※14-444242	10.5mm × 420mm
14-444324	12.0mm × 240mm
14-444326	12.0mm × 260mm
14-444328	12.0mm × 280mm
14-444330	12.0mm × 300mm
14-444332	12.0mm × 320mm
14-444334	12.0mm × 340mm
14-444336	12.0mm × 360mm
※14-444338	12.0mm × 380mm
※14-444340	12.0mm × 400mm
※14-444342	12.0mm × 420mm
14-444424	13.5mm × 240mm
14-444426	13.5mm × 260mm
14-444428	13.5mm × 280mm
14-444430	13.5mm × 300mm
14-444432	13.5mm × 320mm
14-444434	13.5mm × 340mm
14-444436	13.5mm × 360mm
※14-444438	13.5mm × 380mm
※14-444440	13.5mm × 400mm
※14-444442	13.5mm × 420mm

色調：ライトグリーン 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
販売名：フェニックスフェモラルネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00526000

(※はオプションサイズです。詳しくは弊社営業担当者にお尋ね下さい。)

Screw

4mm Phoenix Screws

カタログ番号	サイズ
※14-400420	4mm × 20mm
※14-400422	4mm × 22mm
※14-400424	4mm × 24mm
※14-400426	4mm × 26mm
※14-400428	4mm × 28mm
※14-400430	4mm × 30mm
※14-400432	4mm × 32mm
※14-400434	4mm × 34mm
※14-400436	4mm × 36mm
※14-400438	4mm × 38mm
※14-400440	4mm × 40mm
※14-400442	4mm × 42mm
※14-400444	4mm × 44mm
※14-400446	4mm × 46mm
※14-400448	4mm × 48mm
※14-400450	4mm × 50mm
※14-400452	4mm × 52mm
※14-400454	4mm × 54mm
※14-400456	4mm × 56mm
※14-400458	4mm × 58mm

色調：ゴールド 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
4mm スクリューは Tibial 7.5mm 遠位にのみ使用します。
販売名：フェニックス ティビアル ネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00613000

5mm Phoenix Screws

(ネイルの種類によって標準出荷セットが変わります)

カタログ番号	サイズ
14-405020	5mm × 20mm
14-405022	5mm × 22mm
14-405024	5mm × 24mm
14-405026	5mm × 26mm
14-405028	5mm × 28mm
14-405030	5mm × 30mm
14-405032	5mm × 32mm
14-405034	5mm × 34mm
14-405036	5mm × 36mm
14-405038	5mm × 38mm
14-405040	5mm × 40mm
14-405042	5mm × 42mm
14-405044	5mm × 44mm
14-405046	5mm × 46mm
14-405048	5mm × 48mm
14-405050	5mm × 50mm
14-405052	5mm × 52mm
14-405054	5mm × 54mm
14-405056	5mm × 56mm
14-405058	5mm × 58mm
14-405060	5mm × 60mm
14-405065	5mm × 65mm
14-405070	5mm × 70mm
14-405075	5mm × 75mm
14-405080	5mm × 80mm
14-405085	5mm × 85mm
14-405090	5mm × 90mm
14-405095	5mm × 95mm
※14-405100	5mm × 100mm
※14-405105	5mm × 105mm
※14-405110	5mm × 110mm

色調：ライトグリーン 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
販売名：フェニックス フェモラル ネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00526000

End Cap

Phoenix Tibial Nail End Caps

カタログ番号	サイズ
14-441280	0mm
14-441281	5mm
14-441282	10mm
14-441283	15mm
※14-441284	20mm

色調：シルバー 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
販売名：フェニックス ティビアル ネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00613000

Phoenix Retrograde Femoral End Caps

カタログ番号	サイズ
14-444180	0mm
14-444185	12.0mm × 1mm
14-444181	12.0mm × 5mm
14-444182	12.0mm × 10mm
14-444183	12.0mm × 15mm
※14-444184	12.0mm × 20mm
14-444190	13.5mm × 1mm
14-444191	13.5mm × 5mm
14-444192	13.5mm × 10mm
14-444193	13.5mm × 15mm
※14-444194	13.5mm × 20mm

色調：シルバー 材質：チタン合金 (Ti-6Al-4V)
販売名：フェニックス フェモラル ネイルシステム
医療機器製造販売承認番号：22200BZX00526000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel. 0463-30-4801
Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡