



FastFrame™ External Fixation System

FastFrame™ 創外固定システム

製品カタログ



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

製品の特長

FastFrame™ 創外固定システムは、『簡便性と高い操作性でスピー

救急医療の現場に求められる「簡便」かつ「短時間」での設置を目指し、開発されました。

- オールインワンの滅菌済みディスプレイにより、緊急手術にも対応
- 組立済みのフレームセットにより、設置時間を短縮
- 新しいテクノロジーを導入し、高い操作性を追求



オールインワンの滅菌済みディスプレイ

- フレーム一式、セルフドリリングピン及び器械が同梱されたオールインワンキット

ボールジョイント

- 球体による3次元的な整復が可能



FastFrame
KNEE SPANNING

2
47-5300

『ディーな設置を可能にした』 高機能フレームキットです。

テレスコーピング チューブ


- 伸縮が自在で、整備操作が容易
- イメージ透過性に優れたアルミ合金製チューブ
- 広範囲*にわたるピンポジション

*ニー スパニング：265～625mm

ダメージコントロール：75～340mm

ボールジョイント ウィングナット

- ナットを締めることで2箇所ボールジョイントをまとめてロックすることが可能
- 「整備操作」⇔「仮止め」を簡便に実施

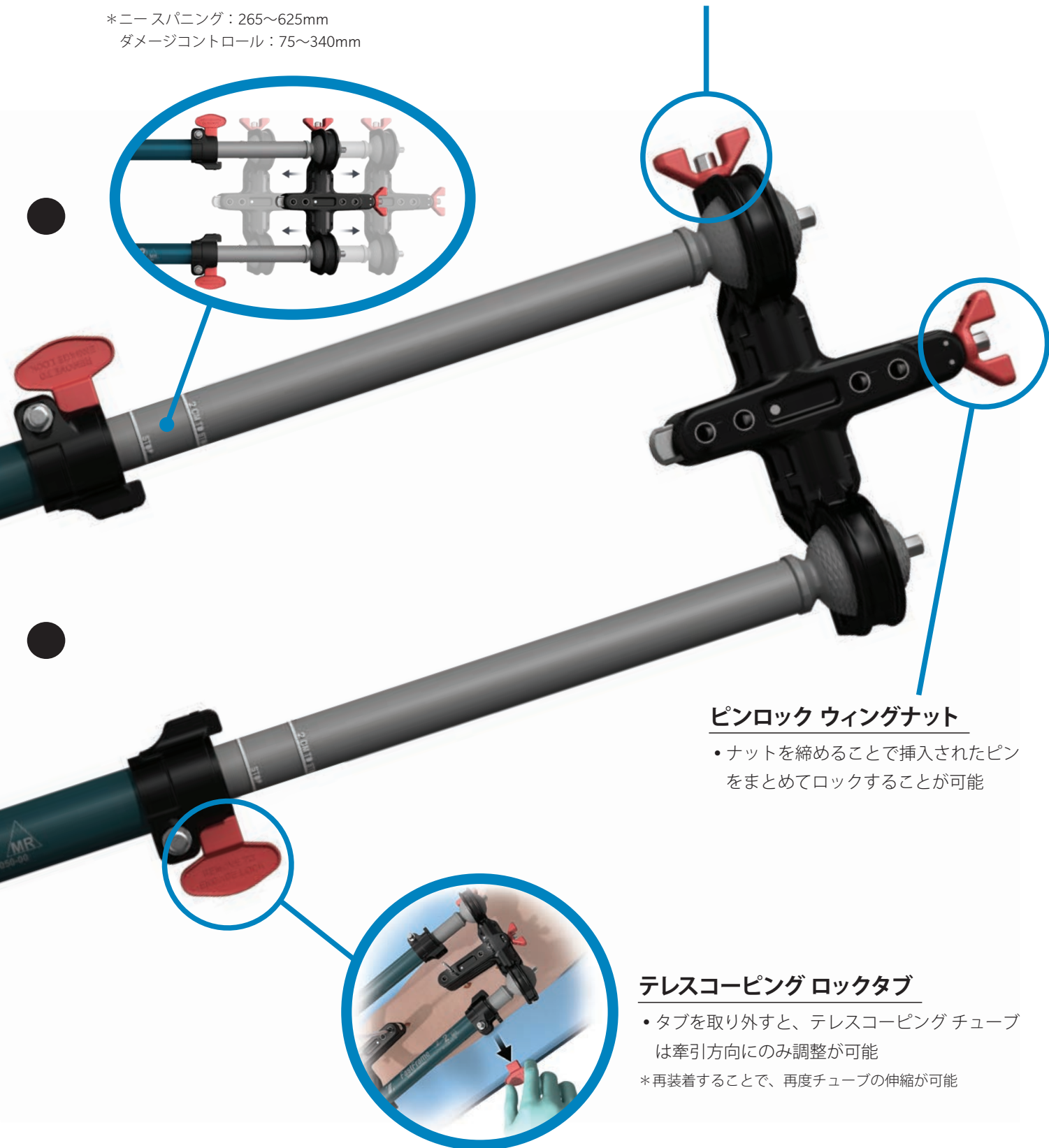

ピンロック ウィングナット

- ナットを締めることで挿入されたピンをまとめてロックすることが可能

テレスコーピング ロックタブ

- タブを取り外すと、テレスコーピング チューブは牽引方向にのみ調整が可能
- *再装着することで、再度チューブの伸縮が可能

製品情報

カタログNo.	47-5300-030-00	47-5300-050-00
商品名	FastFrame創外固定キット ダメージコントロール フレーム(ピン4本入)	FastFrame創外固定キット ニー スパニング フレーム(ピン4本入)
外観		
ワーキングレンジ	75~340mm	265~625mm
主な適応	下肢長管骨骨折 (大腿骨/脛骨)	膝関節周囲骨折
共通構成		ピン×4 (5.0mm径、200mm長、スレッド65mm)
		Tハンドルドライバー×1
		トロカー/スリーブ×2
		テレスコーピング ロックタブ×2

販売名：FastFrame 創外固定システム
医療機器製造販売承認番号：23000BZX00359000



ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

●カスタマーサービス(商品のご注文)…………… Tel.0463-30-4801
Fax.0463-30-4821

営業拠点:札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡