

# ANN Proximal Humeral System

ANN上腕骨近位端用 髓内釘システム


製品カタログ



ZIMMER BIOMET  
Your progress. Our promise.®

# ANN上腕骨近位端用 髓内釘システム

ANN ヒューメラルシステムは、簡便で効率的な操作によって、幅広い症例に対応できる上腕骨用髓内釘システムです。

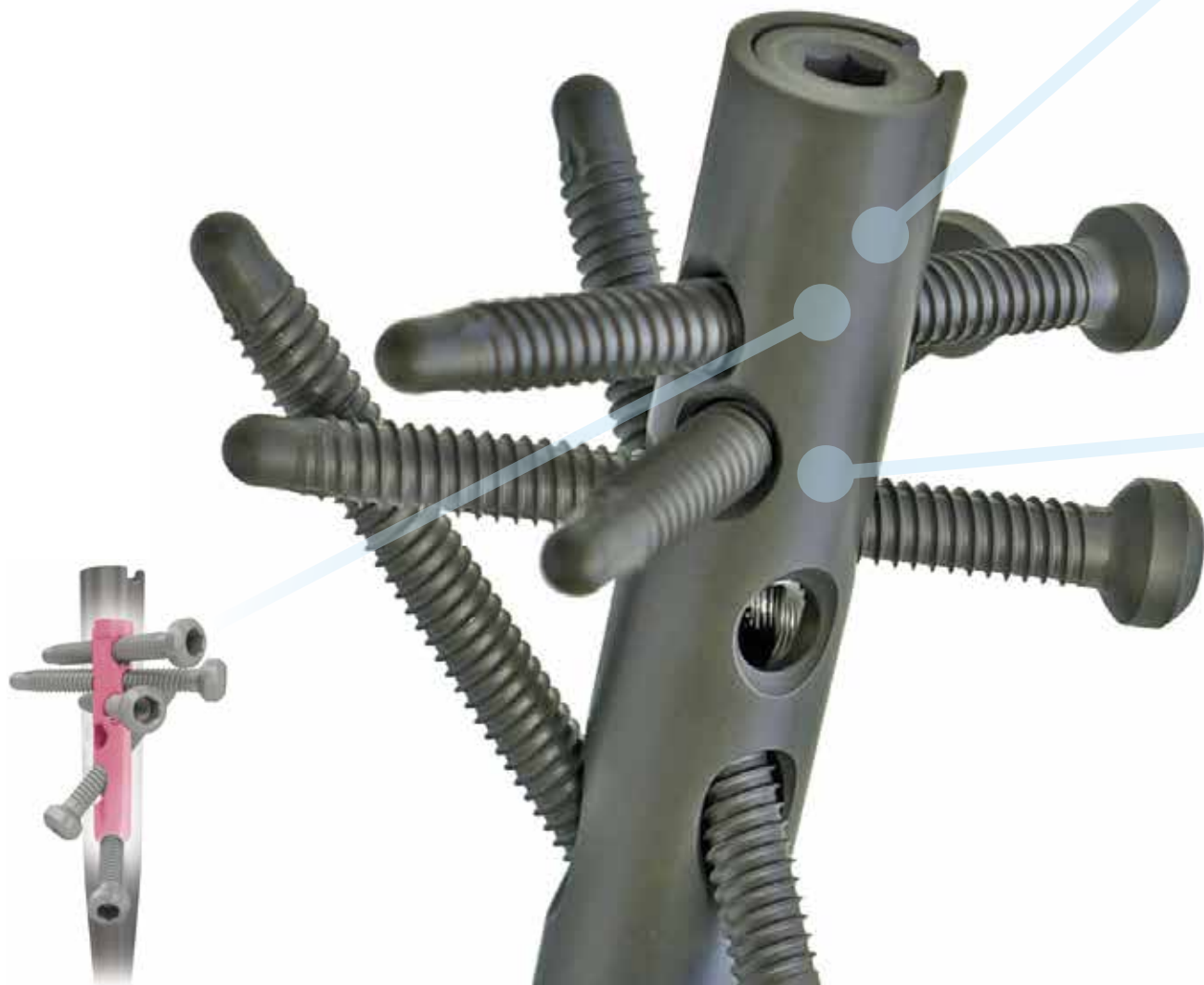


## CoreLock™ 機構

すべての近位スクリューをまとめて機械的にロックできる CoreLock™ 機構により、近位骨片に対する角度安定性を高めるとともに、術後にスクリューがバックアウトするリスクを低減しています。

## 三次元的に支持するスクリュー配置

3本のトランスバーススクリュー、APスクリュー、打上げスクリューからなる近位スクリューによって、骨頭内を三次元的且つ広範に支持します。また、結節部の適切な固定を実現するために左右別のネイルデザインを採用しています。

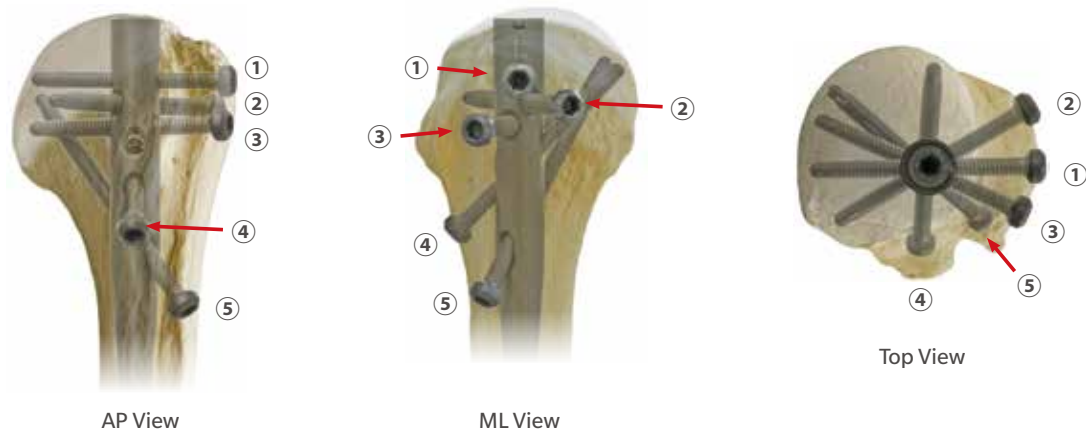


## 様々な固定オプション

挿入方向を選択可能な近位スクリュー、近位骨片の固定を補助するワッシャー、アンカリング効果を活かすためのエンドキャップ、遠位寄りの骨折に対応するためのロングネイル、豊富なネイル遠位径のバリエーションなどによって、幅広い症例に対応が可能です。



## 簡便で効率的な手術器械

ジグやスリーブ類などの主要な手術器械は、使用する部位などによってカラーコーディングされており、それらは器械ケース内に手順に沿ってわかりやすく配置されています。

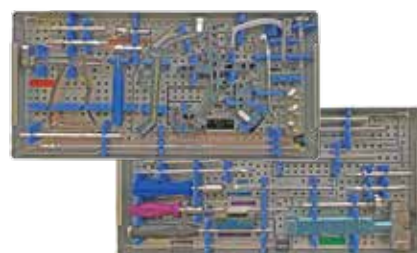

# インプラント一覧

## ANN プロキシマルヒューメラル

ネイル径	カタログ No.		長さ
	右	左	
7mm	47-2496-160-07	47-2496-161-07	16cm
9mm	47-2496-160-09	47-2496-161-09	
11mm	47-2496-160-11	47-2496-161-11	

## ANN プロキシマルヒューメラル ロング

ネイル径	カタログ No.		長さ	
	右	左		
7mm	47-2496-XX0-07	47-2496-XX1-07	20 ~ 26cm (2cm 毎)	28cm
8.5mm	47-2496-XX0-08	47-2496-XX1-08	20 ~ 26cm (2cm 毎)	28cm
10mm	47-2496-XX0-09	47-2496-XX1-09	20 ~ 26cm (2cm 毎)	28cm

## 4.0mm ANN プラントティップスクリュー (近位用)

カタログ No.	長さ
47-2486-0XX-40	34 ~ 60mm (2mm 毎)
	60 ~ 70mm (5mm 毎)
	75mm, 80mm




## 4.0mm ANN コーティカルスクリュー (遠位用)

カタログ No.	長さ
47-2486-1XX-40	22 ~ 34mm (2mm 毎)
	36mm, 38mm, 40mm



## ANN ワッシャー

カタログ No.	
47-2488-000-04	スモール
47-2488-000-05	スパイダー

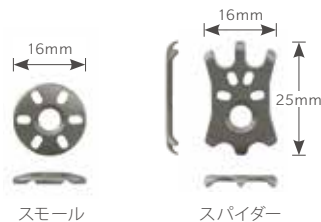

## ANN PH エンドキャップ

カタログ No.	長さ
47-2488-010-00	0mm
47-2488-010-02	2.5mm
47-2488-010-05	5mm
47-2488-010-07	7.5mm



## ANN PH エンドキャップ (ネイル径 11mm 用)

カタログ No.	長さ
47-2488-011-02	2.5mm
47-2488-011-05	5mm
47-2488-011-07	7.5mm

販売名: ANN ヒューメラルシステム  
承認番号: 30100BZX00105000

■ はオプション



## ジンマー バイオメット

本社 〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目11番1号 住友不動産芝公園タワー15階  
Tel. 03-6402-6600 (代表) Fax. 03-6402-6620  
<https://www.zimmerbiomet.com/ja>

● カスタマーサービス (商品のご注文) ..... Tel. 0463-30-4801  
Fax. 0463-30-4821

営業拠点: 札幌、仙台、高崎、千葉、東京、吉祥寺、横浜、金沢、松本、名古屋、大阪、岡山、広島、福岡